



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY MASSAGE CỔ - VAI - LƯNG **KN 79**

CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG



CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ
ĐỦ TIÊU CHUẨN XUẤT KHẨU



① Thư cảm ơn:

💖 Cô chú, anh chị thân mến!


KINGEDO xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô chú, anh chị vì đã tin tưởng chọn máy massage KN79 làm quà tặng cho người thân

💖 Sự tin yêu của cô chú, anh chị dành cho sản phẩm chất lượng cao, giá bình dân chính của King Edo chính là động lực để công ty không ngừng cải tiến sản phẩm và dịch vụ vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn

💖 Nếu có điều gì chưa hài lòng, xin vui lòng liên hệ qua số 0393 499 999 hoặc quét mã QR dưới đây. Phản hồi của cô chú, anh chị là điều KINGEDO luôn lắng nghe và trân trọng.

② Hướng dẫn sử dụng

Các nút chức năng

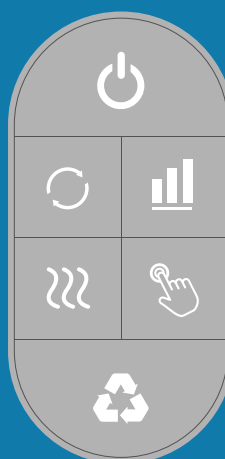


- ⏻ — Bật/Tắt
- 🌀 — Bật nhiệt
- 🔄 — Đảo chiều con lăn
- 📊 — Tăng cường độ
- 👉 — Đổi chế độ massage
- ♻️ — Tiết kiệm điện năng

MADE IN VIETNAM



**QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG NHẮN TIN,
QUAN TÂM ZALO OA CỦA KING EDO
ĐỂ KÍCH HOẠT BẢO HÀNH**

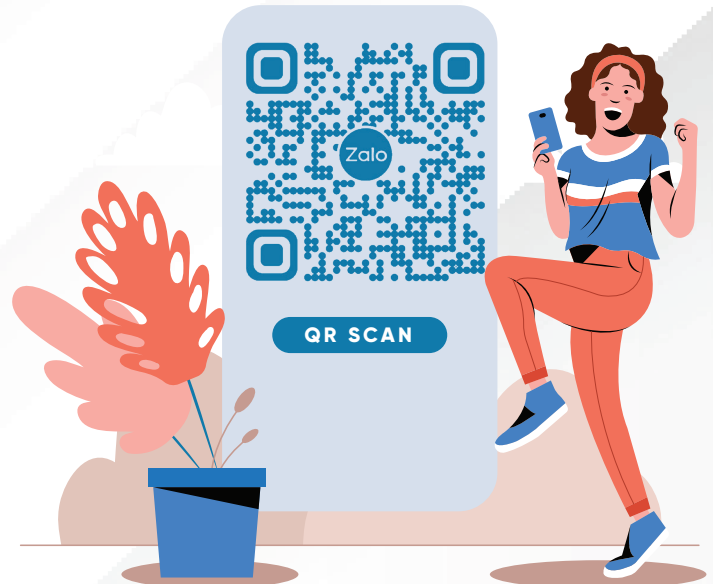

3 *Cách bảo quản và lưu ý khi sử dụng máy massage KN79:*

**Lưu ý khi sử dụng:*

- Chỉ đặt máy massage lên bề mặt phẳng để đảm bảo an toàn và hiệu quả massage tốt nhất.
- Kiểm tra nguồn điện trước khi sử dụng, đảm bảo điện áp phù hợp với thông số của máy.
- Tránh dùng máy ở phòng tắm, gần nguồn nước để đảm bảo an toàn điện.
- Không sử dụng khi cơ thể còn ướt để tránh nguy cơ giật điện hoặc làm hỏng máy

**Cách bảo quản máy massage cổ - vai - lưng:*

- Vệ sinh máy thường xuyên bằng khăn mềm, lau sạch bề mặt máy sau mỗi lần sử dụng.
- Tránh để bụi bẩn hoặc nước lọt vào động cơ, có thể làm ảnh hưởng đến hiệu suất của máy.
- Không tự ý tháo rời hoặc sửa chữa máy, nếu có vấn đề hãy liên hệ trung tâm bảo hành.
- Bảo quản máy ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp.
- Không để vật nặng đè lên máy để tránh làm hỏng cấu trúc và động cơ bên trong.
- Cuộn dây điện gọn gàng sau khi sử dụng để tránh đứt gãy hoặc rối dây.
- Nếu không sử dụng trong thời gian dài, hãy vệ sinh và cất máy vào hộp để tránh bụi bẩn

 Thực hiện đúng các hướng dẫn trên sẽ giúp máy massage cổ - vai - lưng King Edo KN79 bền hơn, hoạt động tốt hơn và đảm bảo an toàn khi sử dụng!

Cảm ơn Quý khách đã tin tưởng và lựa chọn máy massage cổ - vai - lưng King Edo KN79.

 Chúc Quý khách có những giây phút thư giãn tuyệt vời! 

KING EDO

NHÀ MÁY SẢN XUẤT GHẾ MASSAGE VÀ THIẾT BỊ THỂ THAO TẠI VIỆT NAM